

安全のために必ず守ってください

ご使用の前に取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使い下さい。
誤った使い方をされますと事故の原因になります。

絵表示について

製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止する為に、いろいろな絵表示をしています。

その表示と意味は次のようになっています。内容をよく理解してから本文をお読み下さい。



危険
(Danger)

取扱を誤った場合、使用者が死亡又は重症を負う危険が切迫して生ずる事が想定される場合



警告
(Warning)

取扱を誤った場合、使用者が死亡又は重症を負う可能性が想定される場合



注意
(Caution)

取扱を誤った場合、使用者が傷害を負う危険が想定される場合及び物的損害のみ発生が想定される場合

絵表示の例



△記号は、危険、警告、注意をうながす内容があることをお知らせするものです。

図の中や近くに具体的な「注意喚起」内容を示しています。



分解禁止

⊘記号は、禁止の行為であることをお知らせするものです。

図の中や近くに具体的な「禁止」内容を示しています。



電源プラグを抜く

●記号は、行為をお守りいただく内容をお知らせするものです。

図の中や近くに具体的な「指示」内容を示しています。




危険

下記のような医用電子機器との併用は、誤動作を招く恐れがありますので使用しないで下さい。

- ◆ペースメーカー等の体内植込み型医用電子機器
- ◆人工心肺等の生命維持用医用電子機器
- ◆心電計等の装着型の医用電子機器



禁止

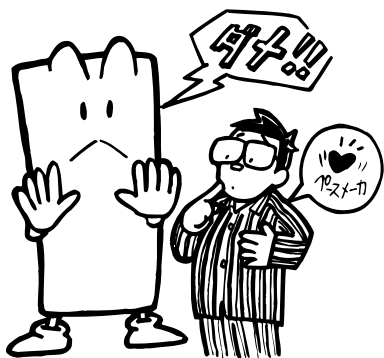

乳幼児や身体の不自由な方は、付添いなしでは使用しない！

- 温熱治療の場合、乳幼児・お年寄り・ご病人など身体の自由のきかない方や、皮膚感覚の弱い方には、周囲の方が使用温度に充分ご注意ください。


- 低温やけどの恐れがあります。



やけど注意



禁止

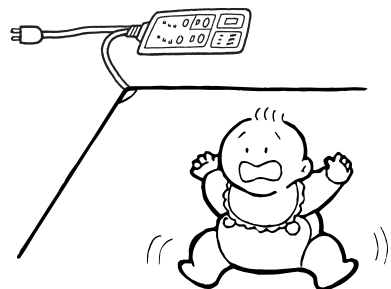


製品を丸洗いしない！

- ショートや発熱により、火災や感電につながります。



禁止

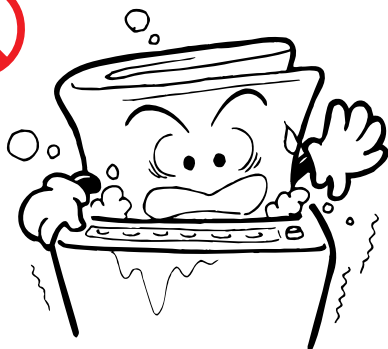

皮膚の弱い方、眠気を誘う薬を服用された方、深酒・疲労の激しい方は、使用に注意すること。

- 低温やけどをすることがあります。



やけど注意



使用注意



警告

異常時の処置

異常に熱い、変な臭いがするときなどは、直ちに電源スイッチを切り、その後必ず電源プラグをコンセントから抜く！


- ショートや発熱により、火災や感電につながります。
- 販売店にご相談下さい。



感電注意



電源プラグを抜く

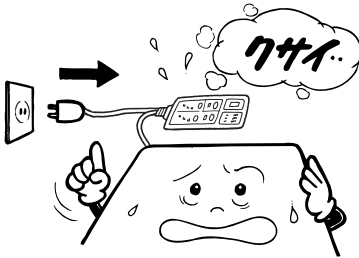

本体外装部がこわれたときは、直ちに電源スイッチを切り、その後必ず電源プラグをコンセントから抜く！


- ショートや発熱により、火災や感電につながります。
- 販売店に修理を依頼して下さい。
- お客様による修理は危険ですから、絶対おやめ下さい。



感電注意



電源プラグを抜く

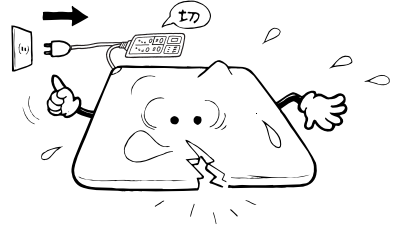

内部に水や異物が入ったときは、直ちに電源スイッチを切り、その後必ず電源プラグをコンセントから抜く！


- ショートや発熱により、火災や感電につながります。
- 販売店に修理を依頼して下さい。



感電注意



電源プラグを抜く

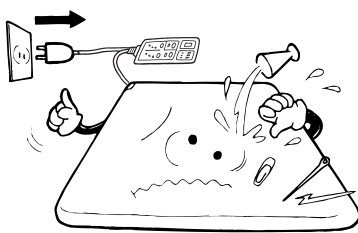

電源コードがいたんだ（芯線の露出など）ときは、直ちに電源スイッチを切り、その後必ず電源プラグをコンセントから抜く！（いたんだ部分を持たない！）


- ショートや発熱により、火災や感電につながります。
- 販売店に修理を依頼して下さい。



感電注意



電源プラグを抜く

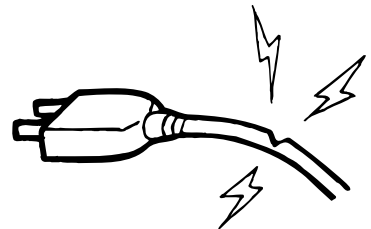




警告

停電の時は直ちに電源スイッチを切り、その後必ず電源プラグをコンセントから抜く！


- 復帰したときに危険です。



電源プラグを抜く

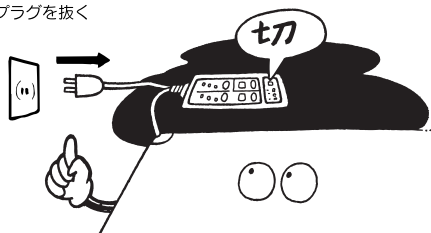

使用中に身体の異常が現れたり、感じたときは直ちに使用を中止し医師に相談する！

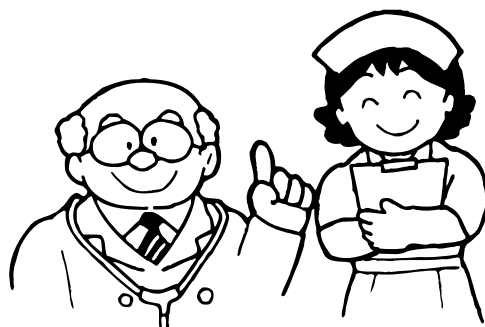

破損・分解・改造の禁止

電源コードを破損させない！


- ショートや発熱により、火災や感電につながります。
- 次のようなことをすると、破損につながりますので、絶対おやめ下さい。
※無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、束ねたり、加工したり、加熱したり、重い物を載せたり、挟み込んだりしない。



感電注意



分解禁止

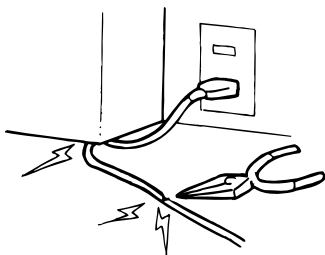

分解や改造及び本体外装部を外さない！


- ショートや発熱により、火災や感電につながります。
- 内部には電圧の高いところがあり、触ると感電につながります。
- 内部の点検・調整・修理は、販売店に依頼して下さい。



感電注意



分解禁止

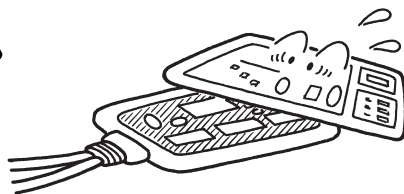



警告

水・湯気・金属物のご注意

浴室など湿気の多い場所では使用しない！

- ショートや発熱により、火災や感電につながります。



感電注意



水場での使用禁止



製品内部に金属物や燃えやすい物を入れない！


- 電気治療器ですので、ピン・針などを突き刺したり、刃物でキズをつけないでください。治療導子をいため、故障の原因になります。
- ショートや発熱により、火災や感電につながります。
- 特にお子様にご注意下さい。



感電注意



禁止

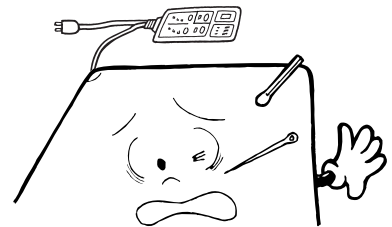


設置・保管時のご注意

平らな所以外で使用しないこと。

- 部分的に過熱して故障の原因となり、やけどをおこすことがあります。



凹凸使用禁止

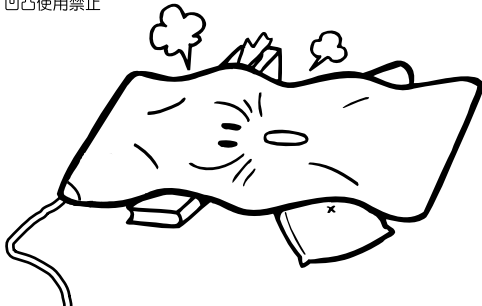

曲げたり折りたたんだままで使用しない！

- 温熱治療の場合、本体の局部に布団を積み重ねたり、保温性の良いものを長時間置かないでください。局部こもり温度で本体が変色することがあります。さらに、このような誤使用を続けると、本体の安全装置が働いて発熱しなくなりますのでご注意ください。
- ショートや発熱により、火災や感電につながります。



禁止





警告

設置・保管時のご注意

やわらかいふとん等の上で使用しないこと。

- やわらかいふとんの上で使用すると、治療導子がしわになり、過熱して故障の原因となります。



やわらかいもの
上で使用禁止

治療導子



やわらかいふとん

治療目的以外には使用しない！

- 故障や事故の原因になります。



禁止




電源電圧・消費電力のご注意

アンカなど熱器具等及び治療機器と併用しない！

- また、コントローラーに他の暖房器具を近づけたり覆ったりしないでください。
- ショートや発熱により、火災や感電につながります。



禁止

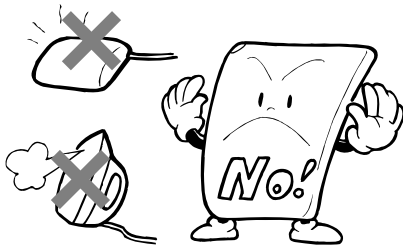


交流100V以外の電源電圧で使用しない！

- ショートや発熱により、火災や感電につながります。



禁止

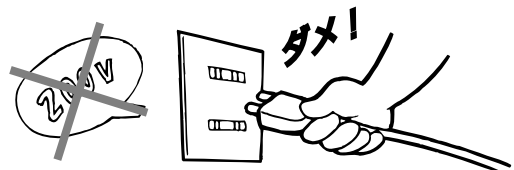



警告

電源プラグのご注意

電源プラグが不完全な接続及び、たこ足配線で使用しない！


- ショートや発熱により、火災や感電につながります。
- 最後までしっかりと正しく接続して下さい。



禁止



感電注意

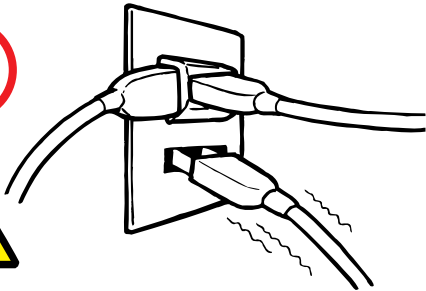

電源プラグにほこりや金属物を付着させない！


- ショートや発熱により、火災や感電につながります。



禁止



感電注意

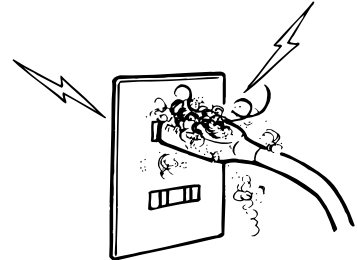

注意


電源コードのご注意

電源コードを抜き差しするときは、必ず電源プラグをもつ！

- コードを引っ張ると、コードに傷が付き、火災や感電につながります。



禁止

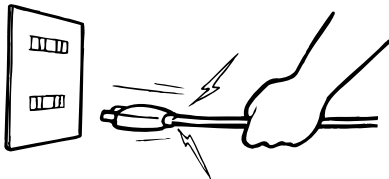

電源プラグをもつときは、濡れた手で触らない！


- 感電や怪我をする事があります。



禁止



感電注意

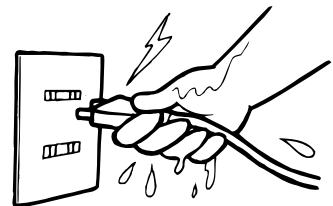

⚠ 注意


移動・旅行時のご注意

長時間使わないときは、安全の為、電源プラグをコンセントから抜いておく！

- 絶縁劣化による感電や漏電火災の原因につながります。



電源プラグを抜く

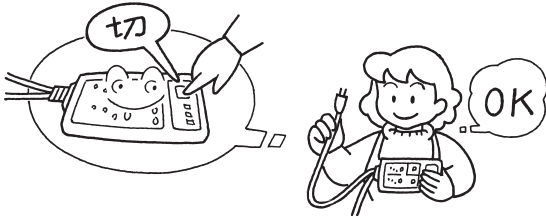


コントローラーは、落としたり衝撃を与えたり、足で踏んだりしない！

- 部品が壊れたりして故障につながります。



禁止

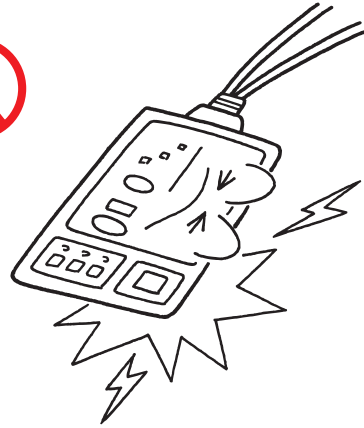


お手入れについて

コントローラーが熱くなる所には置かない！

- 部品が壊れたりして故障につながります。




禁止

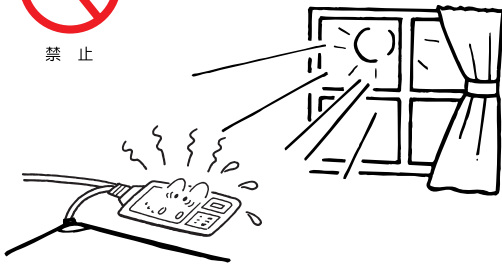

(直射日光等)

お手入れのさいは、安全のため、電源プラグをコンセントから抜く！

- 感電や怪我をする事があります。

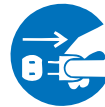

電源プラグを抜く





注意

治療上のご注意



使用注意

次のような場合、もしくは身体上の異常が考えられる場合は、医師の指示に基づいて使用してください。

- (1) 安静を必要とする人（寝返りを打てない人）
- (2) 脳出血直後の人
- (3) 急性脊椎炎のある人
- (4) 感染症疾患のある人
- (5) てんかんのある人
- (6) 高血圧のある人
- (7) 結核性の病気のある人
- (8) 心臓疾患のある人
- (9) 妊娠されている人
- (10) 疾患の急性期（炎症、皮膚病、外傷等）の人
- (11) 熱の高い人
- (12) 適用部位の皮膚に異常がある人
- (13) 悪性腫瘍のある人
- (14) 知覚傷害のある人
- (15) 乳幼児、お年寄り、病人など体の自由がきかない方

低温やけどについて



やけど注意




使用注意

一般的にやけどといえは、火、熱湯、油など高温のものが皮膚にふれておこるものですが、40℃～60℃の比較的低い温度の時でも、長時間皮膚の同じ個所に触れていると（使用状態や体質によっても異なります）低温やけどを起こす場合があります。特に乳幼児、お年寄、病人など体の自由のきかない方には、周囲の方が使用温度に十分ご注意ください。万一赤い斑点や水ぶくれができた場合には、直ちに専門医の診断を受けてください。

収納のしかた


1

電源スイッチを切ってから電源プラグを抜き、コントローラーの接続プラグを本体から外します。(ストッパーを押さえながら外してください。)電源スイッチを入れたまま接続プラグを本体より外しますと、エラー表示になりますが故障ではありません。

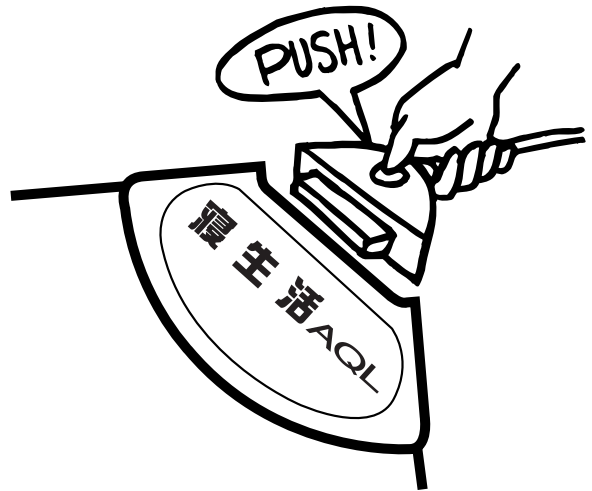

2


本体の温度が下がってから下記のように三つ折りにしてください。
※コントローラーの取り扱いに十分注意してください。

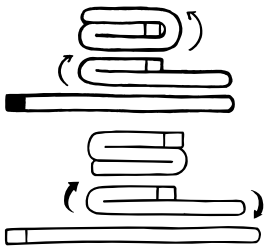

※ダブルサイズはタテ方向には折り曲げないでください。

3

収納するときは、上に物を乗せないようにし、湿気の少ない場所に収納してください。

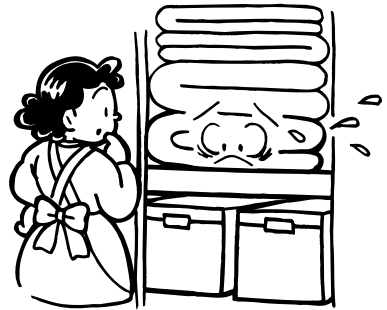


収納上のご注意

あやまった折りたたみ方で収納すると、本体を傷つけたり、あたたかいうちに折りたたむと後で治療導子が、しわになることがあり、折り癖がついたりして、故障の原因となります。



(※梱包時には、折りたたみ方法が違う場合も有ります。)

お手入れのしかた

- ・コントローラーの温熱治療・交互・電位治療切換スイッチを温熱にし、温熱調節スイッチを「強」にし、よく乾燥させてください。次回、気持ちよくご使用になれます。

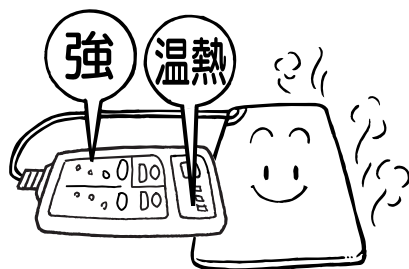

- ・本商品は丸洗い、ドライクリーニング等の洗濯はできません。

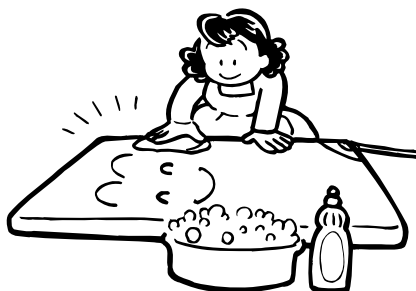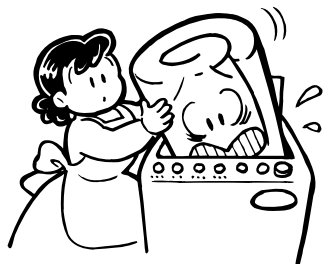


- ・本体の汚れがとくにひどい場合は、中性洗剤（食器用）をとかしたぬるま湯に浸した布をしぼってふきとってください。その後十分乾燥してください。快適にご使用いただくためにシーツやカバーの併用をおすすめします。



- ・シンナー、ベンジンなどの溶剤を使用しますと本体やコントローラーをいためますので、絶対使用しないでください。


- ・コントローラーや、コネクター部はぬらさないようにご注意ください。故障の原因になります。

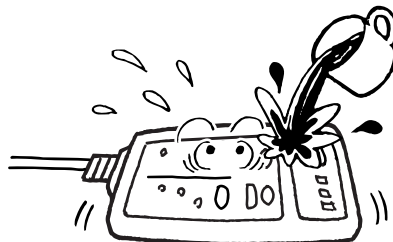

ご使用方法

お願い


寝具本体のコネクター部が
頭部に位置するようにご使用下さい

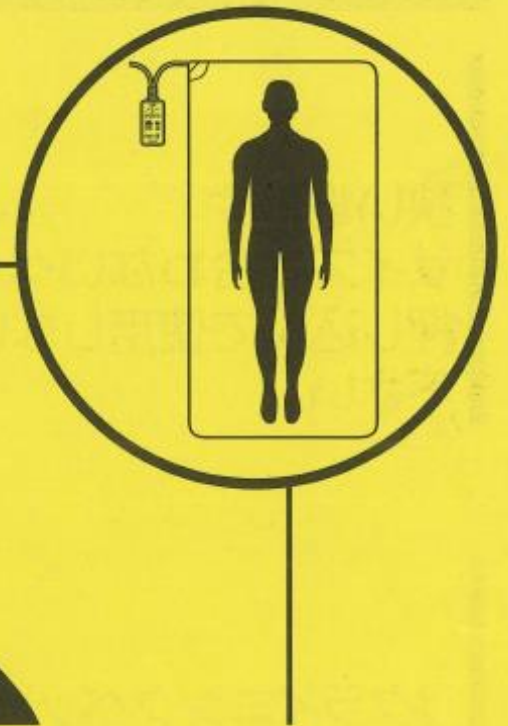

禁止


商品は寝具専用です。敷布団以外では絶対に使用しないで下さい

曲げたり
折りたたんだままの
使用はしないで下さい

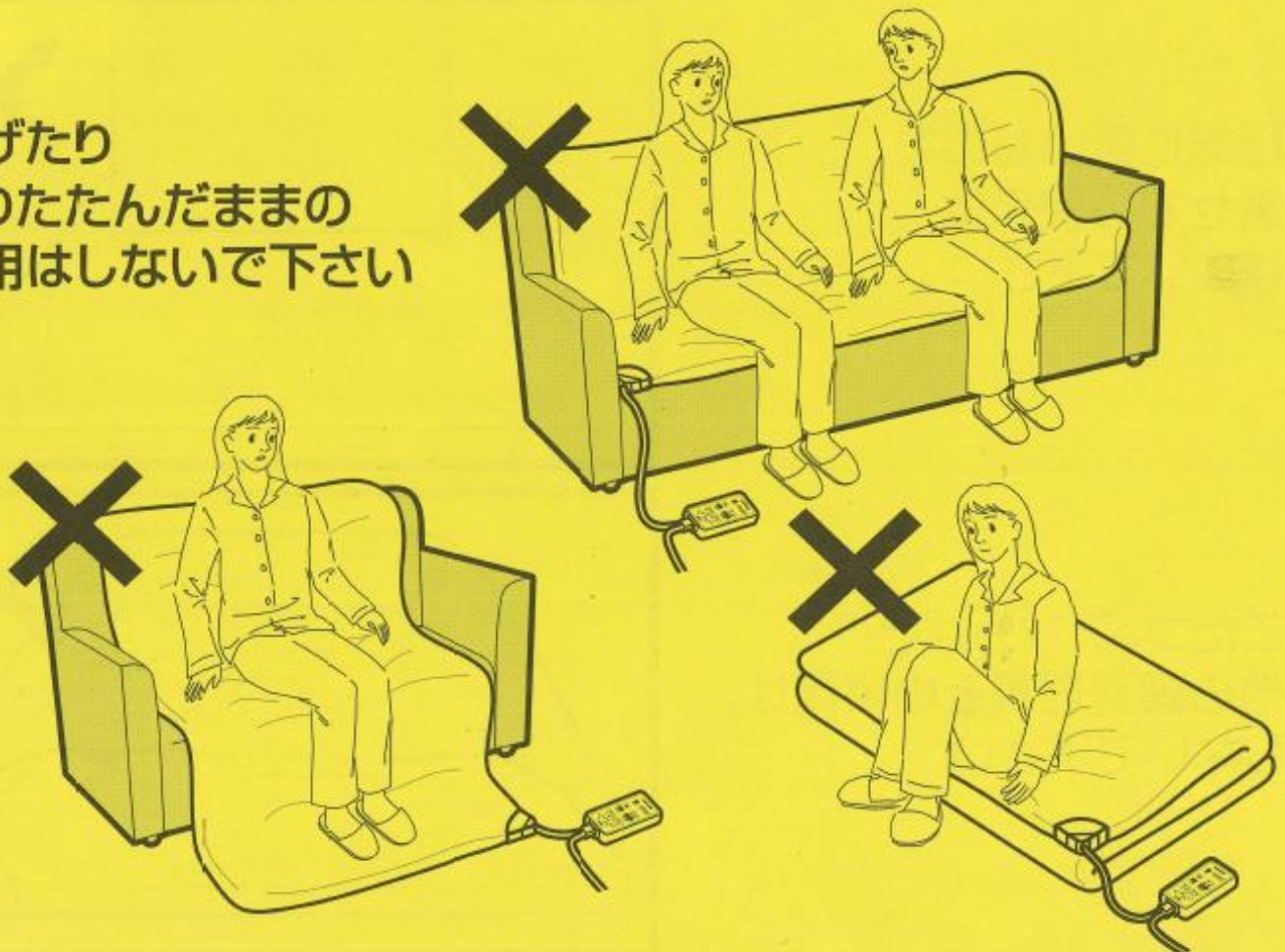

禁止


狭い場所や
サイズの合わないベッドに
押し込んで使用しないで
下さい

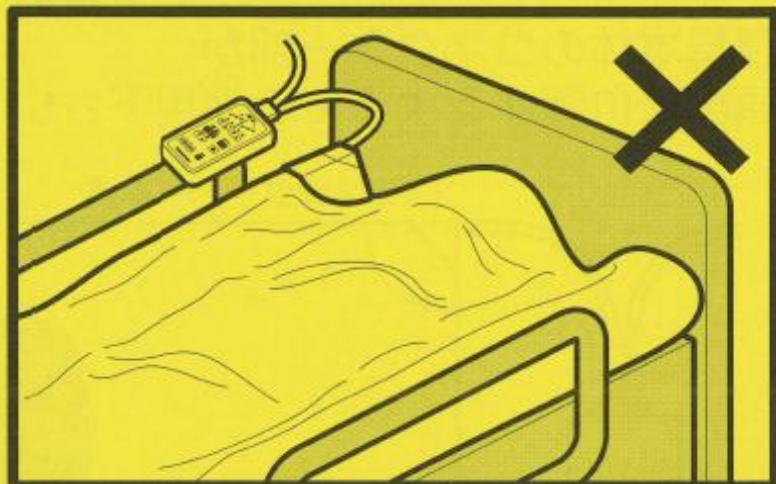

リクライニングベッドなど
折り曲げた状態になる
ベッドでの使用は
しないで下さい



極端に重いものを
乗せての使用は
しないで下さい

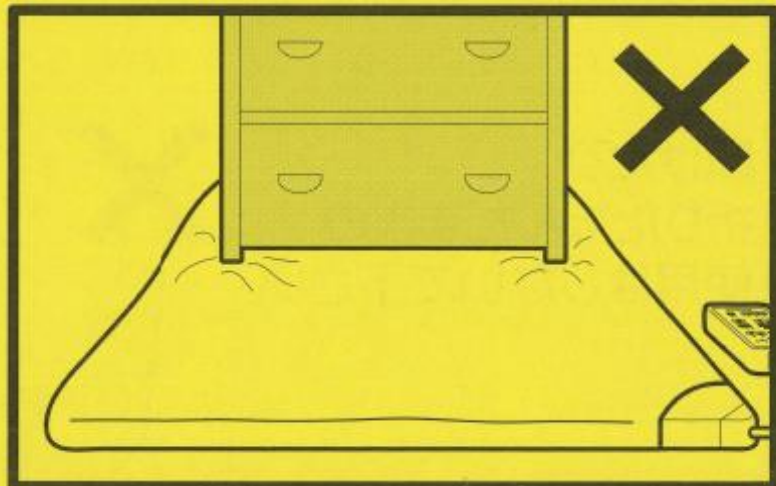

こたつ、アンカなど
他の暖房器具との併用は
しないで下さい

